


DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 使用规则

针对眼睛或皮肤的腐蚀性或刺激性化学物质喷溅事故*

喷溅事故发生后一分钟内的应急处理方法

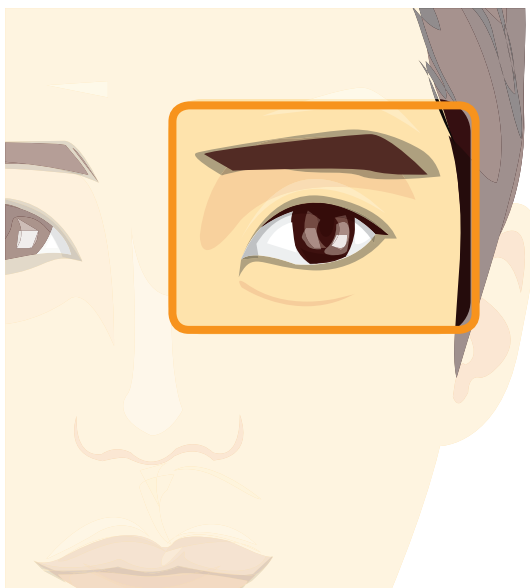

喷溅事故发生后
10 秒内
应采取的措施




1 LIS
50 毫升

喷溅事故发生后
10 秒到 60 秒
应该采取的措施




1 LPM
500 毫升

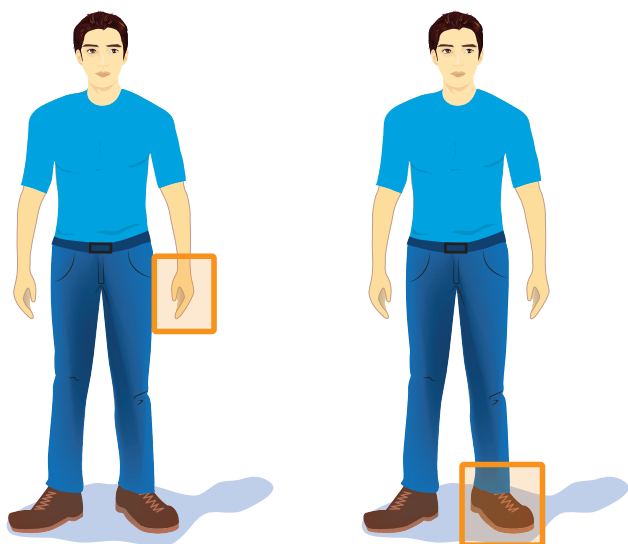

3%
的体表
喷溅事故




1 MICRO DAP
100 毫升

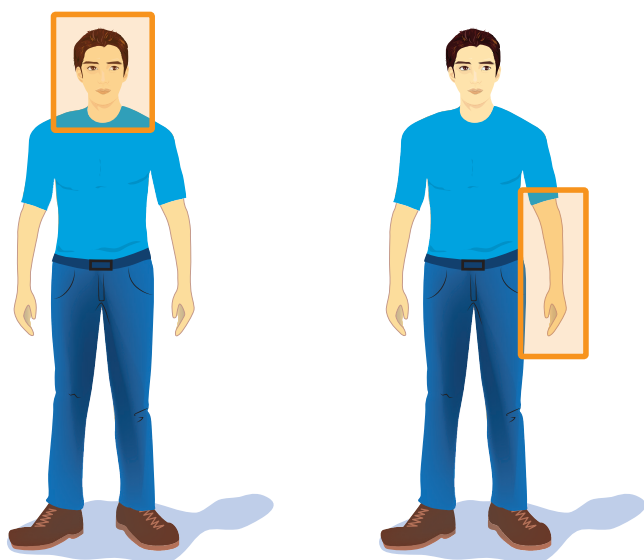

9%
的体表
喷溅事故



1 MINI DAP
200 毫升

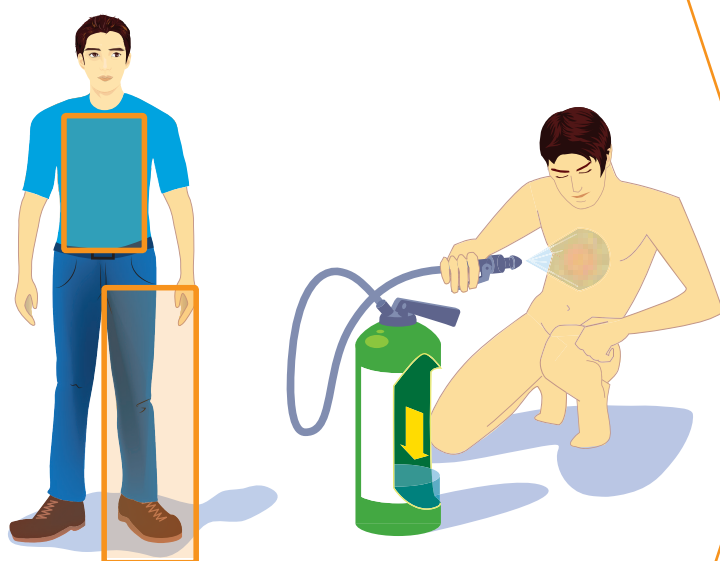

>9%
的体表
喷溅事故



1 DAP
5 立升

* 对氢氟酸和含氟的酸类衍生化合物作用有限。建议使用HEXAFLUORINE® (六氟灵)。

使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 清洗的规则*

- ▶ 在喷溅后**一分钟内**开始冲洗, 从无衣物覆盖的**裸露区域**开始。
- ▶ **快速褪去衣裤/摘下眼镜(包括隐形眼镜)**。
- ▶ 接着用**最快的速度**冲洗刚**褪去衣物**的区域。
- ▶ 不要重新穿回沾到冲洗液或者化学品污染物的衣物。
- ▶ 然后立即到医生处咨询。

关于清洗的一般原则


- ▶ **绝对不要拖延冲洗时间。**
- ▶ 最佳的冲洗方式, 是**第一时间**使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 进行冲洗。
- ▶ 一个包装一次性全部使用完。
- ▶ 如果周围没有DIPHOTERINE® (敌腐特灵), 要先用水进行冲洗然后尽快再用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 进行冲洗。
- ▶ 如果危险化学品与皮肤或眼睛接触的时间**超过1分钟**还没有开始冲洗, 则要延长使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗被污染区域的时间, 为接触时间的3到5倍。
- ▶ 即使延误了眼部冲洗, 最多再冲洗15分钟。
- ▶ **然后应立即到医生处咨询建议**

在使用完DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 冲洗眼部后, 推荐使用AFTERWASHII® (等渗透压缓解眼露) 来使眼睛尽快恢复到正常的生理状态。

如果喷溅到了**口腔内**, 请使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) 漱口, 然后吐出。

如果耳道被喷溅, 尽快使用DIPHOTERINE® (敌腐特灵) LPMD 洗眼液来冲洗耳道, 并向同一侧倾斜头部以便使液体从耳道流出。

使用的过程中会像把一侧的耳朵浸泡在常温下的液体中一样, 会产生有眩晕感, 失重感。这些感觉过几分钟后会自然消失。

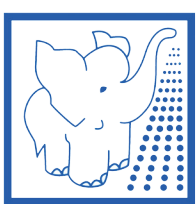

普 利 沃
PREVOR
预 见 并 抢 救

普利沃分公司
Tel.: 010 - 6523 7738

china@prevor.com.cn
www.prevor.com.cn

包装	平均流出时间
LIS (50 毫升)	30秒
MICRO DAP (100 毫升)	50秒
MINI DAP (200 毫升)	1分钟30秒
LPMD (500 毫升)	3分钟
DAP (5 立升)	5分钟

* 对氢氟酸和含氟的酸类衍生化合物作用有限。建议使用HEXAFLUORINE® (六氟灵)。